



СВЕРА

Уральская
машиностроительная компания

ДИАМ
современная лаборатория

www.dia-m.ru
заказ on-line

ШКАФЫ СЕРИИ ЛВЖ

Технологии безопасного хранения легковоспламеняемых жидкостей

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 90Б

ОГНЕУПОРНЫЙ
теплоизоляционный материал

ДОВОДЧИК

обеспечивает плавное закрывание двери

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА
с ключевым запирающим

Двойная терморасширяющаяся
ПРОКЛАДКА

НОЖКИ
регулируемые



ПОЛКИ из оцинкованной стали

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
с предохранителем

ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙ ПОДДОН
из оцинкованной стали
для сбора проливов

Шкафы для безопасного хранения ЛВЖ и ГЖ используются:




Лаборатории




Пищевая
промышленность



Гос. учреждения
(театры, музеи и т.д.)

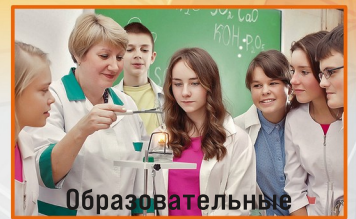

Образовательные
учреждения

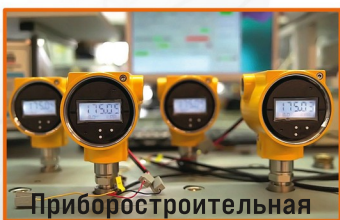

Приборостроительная
промышленность



Производственные
цеха и помещения



Медицинские
учреждения



Нефтегазовая
промышленность

Класс огнестойкости 90 Б

- Класс огнестойкости 90Б (90 минут), изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50862-2012 и ГОСТ Р 57384-2017. Это подтверждено соответствующими огневыми испытаниями по ГОСТ 30247.0-94. TYPE 90 по европейскому стандарту EN 14470-1.
- система автоматической блокировки дверей и вентиляции при повышении температуры до 70 °С



Модель изделия	ЛВЖ-1-590×550×630-1-1-0	ЛВЖ-1-1950×660×660-1-1-0	ЛВЖ-2-1950×1090×660-1-1-0
Наружные размеры (В×Ш×Г), мм	590×550×630	1950×660×660	1950×1090×660
Внутренние размеры, (В×Ш×Г), мм	395×385×392	1650×500×445	1650×930×445
Объем в литрах	55	345	660
Стандартная комплектация	1 полка, 1 полка-поддон, 1 доводчик, блокировка двери, блокировка вентиляции, 4 шт регулировочные ножки	3 полки, 1 полка-поддон, блокировка двери, блокировка вентиляции, 4 шт регулировочные ножки	3 полки, 1 полка-поддон, блокировка двери, блокировка вентиляции, 4 шт регулировочные ножки
Вес, кг	110	390	505

Огнестойкость 10 мин

- Облегчённая конструкция с использованием современных огнеупорных материалов.
- Регулируемые полки.
- Вентиляционное отверстие с пламегасителем.



Модель изделия	ЛВЖ-1-1670×590×450-1-0-0	ЛВЖ-2-1670×1090×450-1-0-0
Наружные размеры (В×Ш×Г), мм	1670×590×450	1670×1090×450
Внутренние размеры, (В×Ш×Г), мм	1500×500×360	1500×1000×360
Объем в литрах	270	540
Стандартная комплектация	поддон - 1 шт, полка - 3 шт, ножка регулировочная - 4 шт	поддон - 1 шт, полка - 3 шт, ножка регулировочная - 4 шт
Вес, кг	150	220